

ベッドセンサー（オープン価格）

<仕様>

信号方式：複合型空気圧力変化検知機構

センサーマット（チューブ含）

寸法：835mm×290mm×19 mm

質量 (g)：376 ±25

無線 LAN 外部通信

規格：802.11 b/g/n 対応

周波数範囲：2.4GHz-2.5GHz

一般医療機器 届出番号：14B3X10054000512

製造販売業者：株式会社 TAOS 研究所

製造販売業者住所：〒222-0033 横浜市港北区新横浜二丁目 2 番 15 号 パレアナビル 801

<セット購入>

ベッドセンサー＋ネットワークカメラでのセット購入など、連携機器の組み合わせは自由を選択できます。

※介護記録ソフトは弊社から購入はできませんので、セット購入からは対象外となります。

<月額利用料>

AttentiveConnect の利用料が月額で別途かかりますが、柔軟な対応が可能です。



ICT で、見守りに余裕と確実さを。
AttentiveConnect™

株式会社マクニカ
フィネッセカンパニー

macnica



AttentiveConnect とは？

センサー情報等を可視化できるマクニカ独自で開発している
プラットフォーム（ソフトウェア）です

1. 見守りを、もっと確実に

リアルタイムで、ベッド上の状態とバイタルをモニタリング

睡眠・覚醒・体動など、利用者様のベッド上での状態を常時確認。心拍数や呼吸数といったバイタル情報もリアルタイムで把握でき、変化に即座に対応可能です。

実際の表示画面

部屋 106

Demotizer >

在床 睡眠

心拍数

71

呼吸数

bpm 20

体動

毎分 低い

※医療目的で人、または動物の診断・治療・予防に使用することはできません。

利用者様の状態をアイコンで直感的に把握

睡眠

覚醒

居眠り

体動

座位

離床

2. わずか数秒で異常をキャッチ

離床やバイタル異常を迅速にアラート通知

離床時は平均約 3 秒でアラートを発報。心拍数や呼吸数が設定した閾値を超えた場合にも、即座に通知が届き、緊急時の対応をサポートします。
異常が検知された際には、分かり易い赤色の表示と音声によって即座に通知されるため、アラートの見逃しを防ぎます。

座位アラート

部屋 106

Demotizer >

在床 覚醒 座位

心拍数

59

呼吸数

bpm 18

体動

毎分 低い

転倒予防
座位

完了 >

バイタル異常アラート

部屋 101

あふり >

在床 睡眠

心拍数

39

呼吸数

bpm 17

体動

毎分 低い


心拍数(低)

0分 1秒
完了 >

3. 睡眠の質を見える化

睡眠深度などを自動でレポート化

利用者様の睡眠深度や、合計睡眠時間等を自動で生成。
自動生成された 24 時間の睡眠パターン（覚醒、REM 睡眠、浅い睡眠、深い睡眠）から、睡眠の傾向を把握できます。

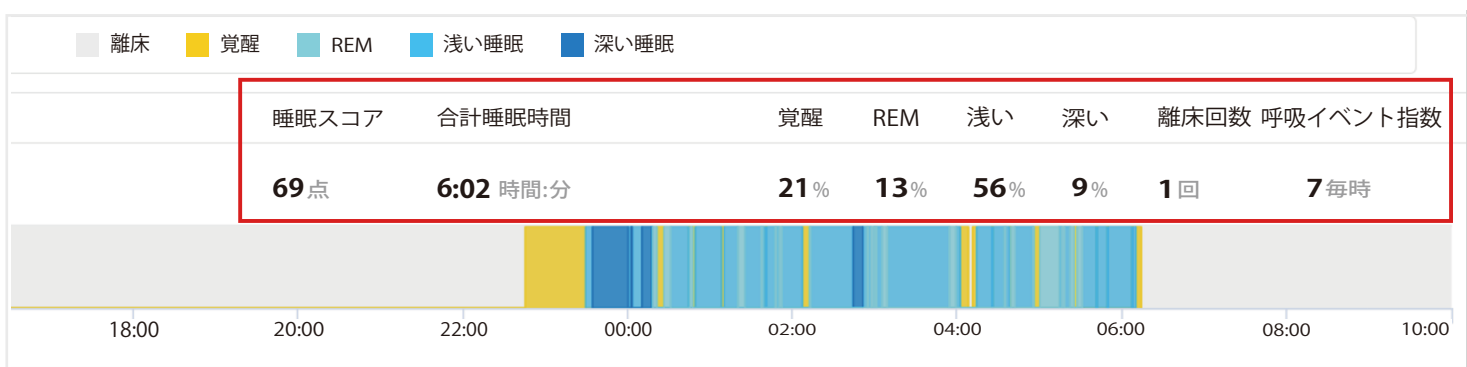

4. 連携機器

ベッドセンサー

離床時・バイタル異常時に素早く検知。
薄型センサーマットをマットレス下に設置するだけ。就寝中も違和感なく使えます。

カメラ

居室内の画像が閲覧可能。
アラート時など、閲覧したいタイミングで確認できます。

温湿度センサー

本体に挿入する事で、温度と湿度の測定が可能。
温度は、閾値に応じてアラートを出す事ができます。

介護記録

ベッドセンサーから心拍や呼吸数、離床などの情報を介護記録ソフトに自動で反映。

インカム

チーム内のコミュニケーションを可能にしつつセンサーからのアラート情報も音声で確認する事でより業務効率化を可能にします。

ナースコール


工事不要のナースコール。
LTE 回線なので、難しい設定は不要。バッテリー式なので、持ち運びも可能。

最先端のベッドセンサーで始める介護の DX




サービス構成

センサー情報はクラウドを介し、AttentiveConnect™で可視化します。
介護職員は、その情報を PC・スマートフォンで確認できます。また、介護施設内、外出先、自宅、いずれからでも確認が可能です。

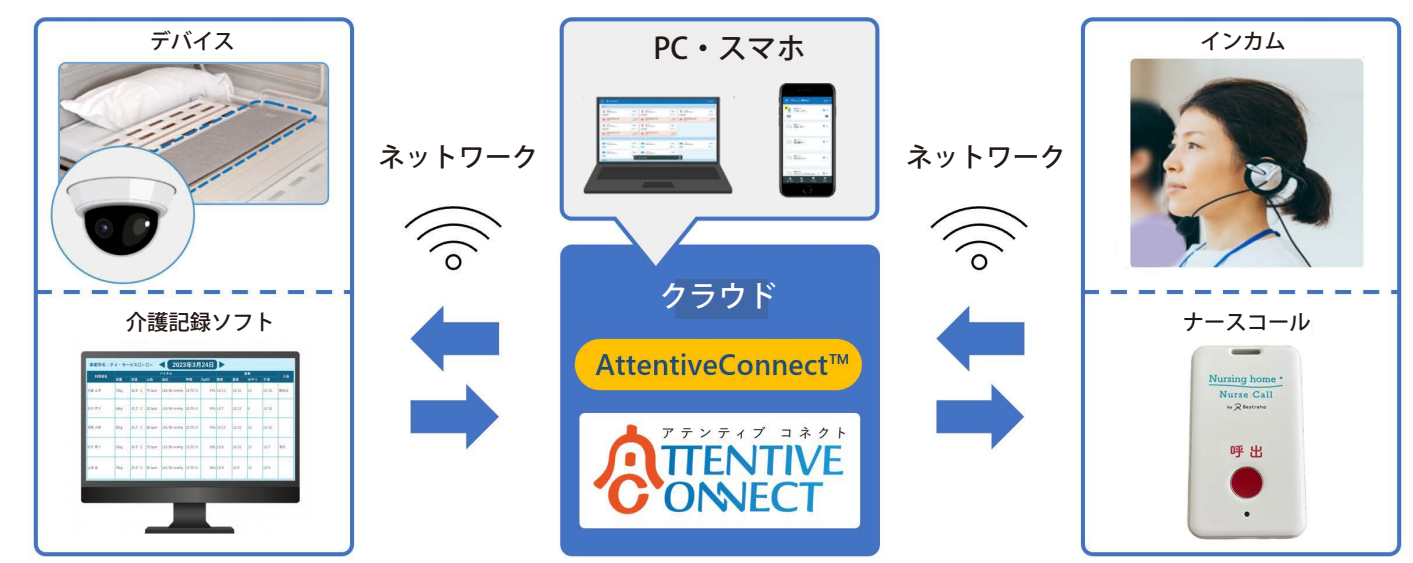

サービス利用例

夜間や少人数体制でも、確実な見守りが求められています。
センサーとクラウドの活用で、離れていても気づける仕組みが実現します。

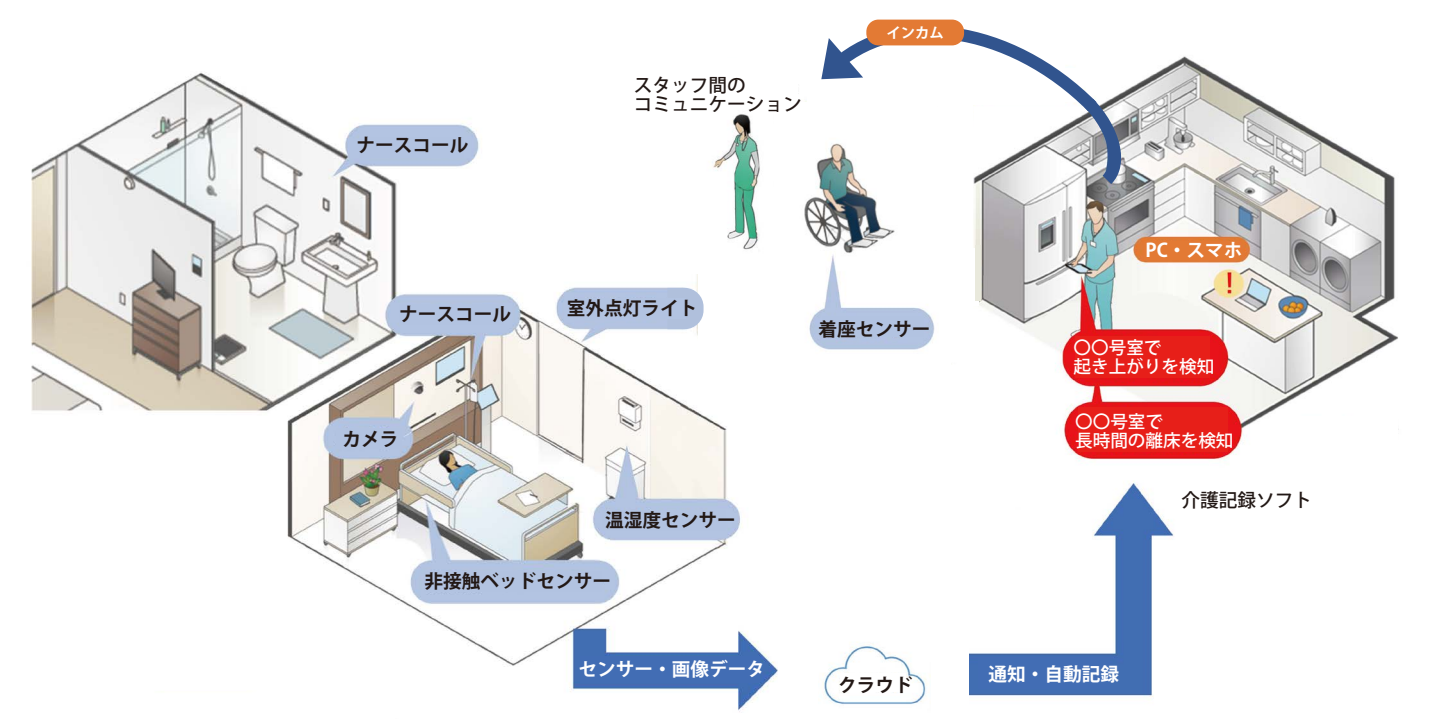

安心の 3 ステップサポート体制

導入前から導入後まで、現場に寄り添った支援を継続します。

導入前	導入時	導入後
事前の不安や疑問を、丁寧にサポート	スムーズな立ち上げを、現地または遠隔で支援	現場に根づくまで、しっかり支援
ネットワークに関するご相談 ・ネットワーク構築支援 デモ貸出サポート ・使用方法のご説明 ・デモ機による効果検証支援	システム環境設定 ・システム設定、機器設置作業の実施 ・機器、システムに関するご説明	テクニカル支援 ・現場の課題解消支援 ・介護職員様のシステムに対する知識底上げ支援 ・効果検証支援 ※一部有償でのご提供となります